



Gep
Biotech, Inc

SANA SHAFI BAKHSI RASPINA

سانا شفا بخش راسپينا



BHA-5000

Automatic Hematology Analyzer

5-partt diffrential)

Innovation Makes Excellence

آدرس کارخانه: البرز، شهرک صنعتی بهارستان، فاز 3

Tell: +982633107-33108000

BHA-5000

Automatic Hematology Analyzer (5-partt differential)

50 Um Hole

روزنه 50 میکرونی

Accurate test of blood cells
with 50 um gem hole

سنجش دقیق سلول های خونی با استفاده از روزنه
50 میکرونی (ساخته شده از متریال سخت)

Digital Filtering

فیلتراسیون دیجیتال

Effectively remove
interence

حذف موثر تداخلات

More Reliable

پایداری بیشتر

Multi-segment counting method, high anti -interference

قابلیت تداخل زدایی بالا، روش شمارش چند مرحله ای

Automatic maintenance and one click

سرویس خودکار و عیب یابی سریع با یک کلیک

Automatic cleaning & maintenace of the liquid system
at regular intervals.

سرویس خودکار و عیب یابی سریع با یک کلیک

Intelligent anti-clogging, burning ,back flushing and

soaking . قابلیت هوشمند ضد گرفتگی (با متدهای سوزاندن ، شستشوی معکوس و خیساندن)

More durable columnar Pt electrode.

بهره گیری از الکترود پلاتینیومی استوانه ای با ماندگاری بالا

More Convenient

Up to 60 samples /hour

ظرفیت پردازش 60 نمونه در ساعت

Cost effective ,less sample volume , only 15 uL sample for each test.

مقرون به صرفه، حجم نمونه مصرفی کمتر ، کمتر از 15 میکرومتر نمونه برای هر آزمایش.

No external computer required ,automatic result print with in-built
printer.

بدون نیاز به کامپیوتر خارجی ، چاپ خودکار نتایج با چاپگر داخلی

Large touch screen ,high-definition color monitor,supporting operation
with rubber gloves.

نمایشگر لمسی بزرگ و مانیتور رنگی با وضوح بالا، با قابلیت کاربری حتی با دستکش های لاستیکی

Patented reagent volume detection,ZERO reagent residue.

سیستم ثبت شده برای تشخیص حجم مصرف ، با حذف کامل باقی مانده معرف



BHA-5000

Coincidence Calibration

Enhance analytical capabilities

ارتقای قابلیت های تحلیلی از طریق کالیبراسیون هم زمانی

Double Channels

دو کاناله

WBC double channels
2D classification ,faster
and more accurate


WBC دو کاناله طبقه بندی دوبعدی در دو کانال سریع تر و دقیق تر

Laser Scattering Method

روش پراکندگی لیزر

Blood cell was irradiated by laser one by one when passing through the detection area and the information of cell size & internal composition was obtained by measuring the scattered light.

Cells were classified according to each information.

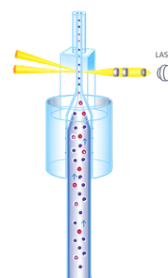

سلول خون هنگام عبور از ناحیه تشخیص، تحت تابش لیزر قرار گرفته و اطلاعات مربوطه به اندازه سلول و ترکیب داخلی آن با اندازه گیری نور پراکنده، بدست می آید.

More Accurate

دقت بالاتر

Digital filtering, coincidence correction in blood cell counting.

فیلتراسیون دیجیتال، اصلاح خطای همزمانی در شمارش سلول های خونی

Intelligent laser scattering classification.

طبقه بندی هوشمند سلول ها بر اساس فناوری پراکندگی لیزری

The smallest gem hole in the industry with high sensitivity.


بهره مندی از کوچک ترین روزنه در سطح صنعت، با حساسیت بسیار بالا

Curve fitting ,floating threshold technology.

بهره گیری از متد برازش منحنی و تکنولوژی آستانه شناور

Optical method testing Basophil.

اندازه گیری بازوفیل ها به روش نوری

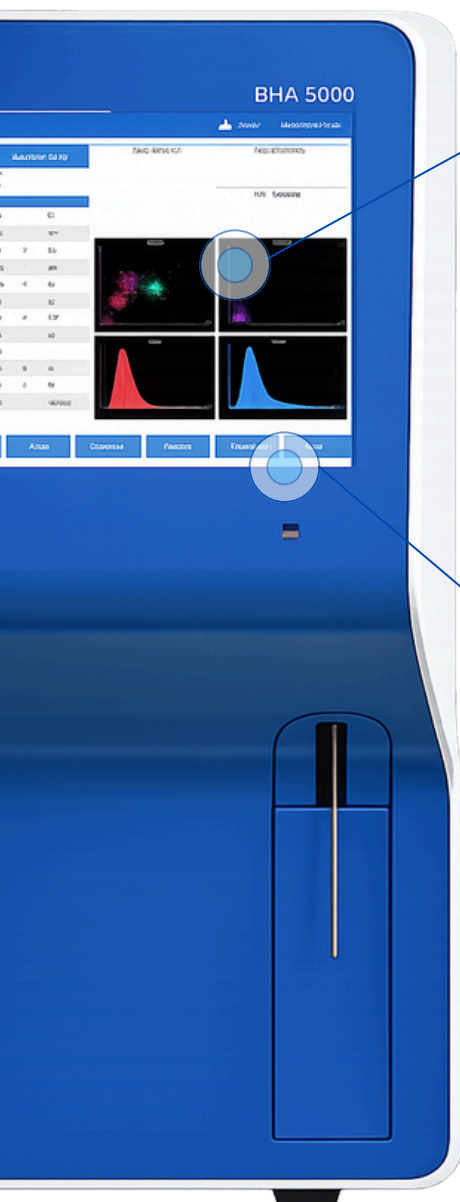

Test Items

پارامترهای مورد سنجش

White Blood Cell	گلبول های سفید	WBC	Red Blood Cell Specific Volume	حجم گلبول قرمز	HCT
Neutrophil#	نوتروفیل	NEU#	Mean Cell Volume	میانگین حجم گلبول قرمز	MCV
Lymphocyte#	لنفوسیت	LYM#	Mean Corpuscular Hemoglobin	میانگین هموگلوبین گلبول های قرمز	MCH
Monocyte#	مونوسیت	MON#	Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	میانگین غلظت هموگلوبین گلبول های قرمز	MCHC
Eosinophil#	ائوزینوفیل	EOS#	Red Cell Volume Distribution Width -Coefficient of Variation	پهنای توزیع گلبول های قرمز - ضریب تغییرات	RDW-CV
Basophil#	بازوفیل	BAS#	Red Cell Volume Distribution Width -Standard Deviation	پهنای توزیع حجم گلبول های قرمز - انحراف معیار	RDW-SD
Neutrophil%	درصد نوتروفیل	NEU%	Platelet	پلاکت ها	PLT
Lymphocyte%	درصد لنفوسیت	LYM%	Mean Platelet Volume	میانگین حجم پلاکت ها	MPV
Monocyte%	درصد مونوسیت	MON%	Platelet Distribution Width	پهنای توزیع پلاکت ها	PDW
Eosinophil%	درصد ائوزینوفیل	EOS%	Plateletcrit	حجم پلاکت ها	PCT
Basophil%	درصد بازوفیل	BAS%	Platelet -Large Cell Ratio	نسبت پلاکت های بزرگ	P-LCR
Red Blood Cell	گلبول قرمز	RBC	Platelet -Large Cell Count	تعداد پلاکت های بزرگ	P-LCC
Hemoglobin (Concentration)		HGB			

Technical Specifications مشخصات فنی

Parameters

شاخص ها

5-part WBC Differential
25 Reportable Parameters
2 Histograms
2 Scatter Grams
Abnormal Sample Alarm

Sample Mode

حالت نمونه

Whole Blood (Venous/Capillary),Pre-dilution

Qc Methods

روش های کنترل کیفیت

L-J QC ,X-B QC

Weight

وزن

21 kg

Dimension

ابعاد

328 mm×471 mm ×446 mm (L×W×H)

Date Storage

ذخیره سازی داده ها

10000

Screen Type

نوع نمایشگر

10.4 inch Resistive Screen

Operating Conditions

شرایط بهره برداری

18~30 C ,≤80% Relative Humidity ,75 kPa ~ 106 kPa



سانا شفا بخش راسپینا

آدرس کارخانه: البرز- شهرک صنعتی بهارستان- فاز 3
ایمیل: info@ortanes.com
شماره تماس: 02633107 - 33108000

FSC CE NMPA IVD

