



Getein
Biotech, Inc

SANA SHAFI BAKHSH RASPINA

سانا شفا بخش راسپينا

**Innovation
Breeds Excellence**



BHA-5100


Automatic Hematology Analyzer
(5-partt diffrential)

Innovation Makes Excellence

آدرس کارخانه: البرز، شهرک صنعتی بهارستان، فاز 3

Tell: +982633107-33108000

BHA-5100

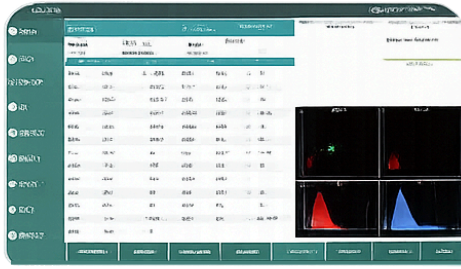

Display Screen


صفحه نمایشگر

10.4 inch LCD display screen

نمایشگاه ال سی دی 10.6 اینچی

Able to display data and digrams simultaneously

قابلیت نمایش همزمان داده ها و نمودارها

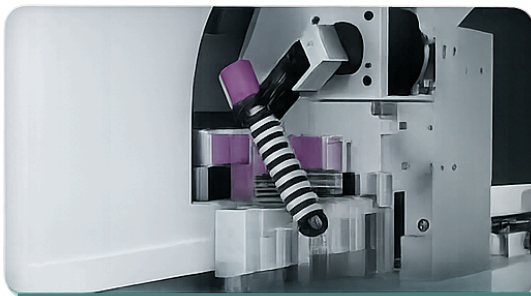

Automatic Sample Mixing Technology

فناوری مخلوط سازی خودکار نمونه

Eliminate error caused by manual mixing

حذف خطاهای ناشی از مخلوط سازی دستی

Floating Threshold Technology

فناوری آستانه شناور

The instrument uses floating threshold technology for cell differentiation

این دستگاه برای تفکیک سلولی، از فناوری آستانه شناور استفاده می کند

Mechanized Standard Sampling System

سیستم نمونه برداری استاندارد مکانیزه

Eliminate error caused by manual operation

حذف خطاهای ناشی از عملیات دستی

Autorotating Blood Collection Tube

چرخش خودکار لوله های نمونه گیری خون

Automatic recognition of barcode without manual adjustment of barcode position

این دستگاه برای تفکیک سلولی، از فناوری آستانه شناور استفاده می کند

Detection Technology

فناوری شناسایی


Digital filter and linear regression.

بهره گیری از فیلترهای دیجیتال و تحلیل دگرسیون خطی



Automatic Hematology Analyzer (5-part differential)

آنالایزر اتوماتیک هماتولوژی تفکیک 5 بخشی

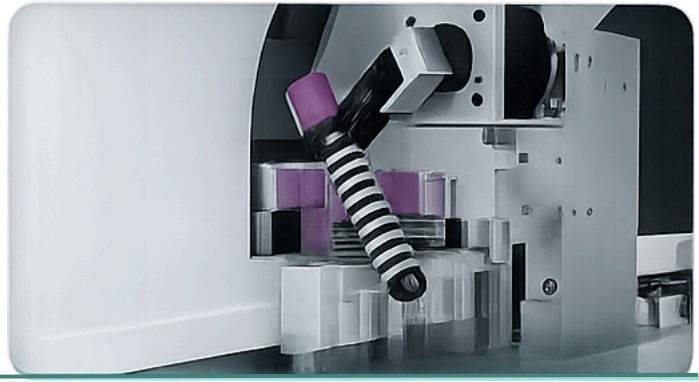

Automatic Hematology Analyzer

نمونه گیری خودکار از طریق سوراخ کردن

Avoid aerosol. Ensure biosafety

جلوگیری از ایجاد آئروسول و تضمین ایمنی زیستی

Smallest Ruby Aperture in the Industry

جلوگیری از ایجاد آئروسول و تضمین ایمنی زیستی

50 μm diameter, unparalleled sensitivity

قطر 50 میکرومتر، حساسیتی بی همتا

No Reagent Residue

عدم وجود باقی مانده محلول واکنشگر

Laser Scattering + Sheath Flow Technology

The instrument uses advanced laser scattering and sheath flow technology to measure blood cells

این دستگاه از فناوری پیشرفته پراکندگی لیزری و جریان غلافی برای اندازه گیری سلول های خون استفاده میکند .

Continuous Testing

No need to keep watching

تست های پیوسته

بدون نیاز به نظارت کاربر

- External Laser Printer Connectivity
قابلیت اتصال به پرینتر لیزری خارجی
- External Keyboard and Mouse Connectivity
قابلیت اتصال به کیبورد و موس خارجی
- Bidirectional Connectivity of LIS and HIS
قابلیت اتصال دوطرفه به LIS و HIS
- Emergency Sample Position Available
دارای جایگاه مخصوص برای نمونه اورژانسی
- Storage capacity: $\geq 100,000$ patient data
ظرفیت ذخیره سازی 100,000 مورد اطلاعات بیمار
- Patient data can be searched, deleted, and printed out
امکان جستجو، حذف و چاپ داده های بیماران
- Closed testing system ensuring biosafety
سیستم آزمایش بسته جهت تضمین ایمنی زیستی

BHA-5100

Technical Parameters

Automatic Hematology Analyzer
(5-part differential)

25 Reportable Parameters

قابلیت گزارش برای 25 پارامتر مختلف

WBC, Lym#, Neu#, Mon#, Eos#, Bas#,
Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,
RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT,

Sample Mode

روش های نمونه برداری خون کامل

Whole Blood (Venous/Capillary) خون کامل
Pre-dilution پیش رقیق سازی

Reagents

محلول

1 Diluent and 2 Lyses 1 عدد رقیق کننده و 2 عدد لایز

Test Speed

سرعت تست

60 T/H 60 تست در ساعت

QC Methods

روش های کنترل کیفی

L-J QC, X-B QC

Screen Type

نوع نمایشگر

10.4 Inch Resistive Screen
صفحه نمایشی مقاومتی 10.4 اینچی

Dimension

ابعاد

705 mm × 670 mm × 570 mm (L × W × H)

Principles

مبانی عملکرد

White Blood Cell: Laser Scattering + Sheath Flow Technology

گلبول های سفید: پراکنش لیزری + تکنولوژی جریان غلافی

Red Blood Cell/Platelet: Impedance Method

گلبول قرمز / پلاکت: روش امپدانس

Hemoglobin: Photoelectric Colorimetry

هموگلوبین: کالری متری فتوالکتریک

Sample Volume

حجم نمونه

Venous blood: 15 μ L

خون وریدی

Capillary blood (Pre-dilution): 20 μ L خون مویرگی (پیش رقیق سازی)

Data Storage

فضای ذخیره سازی

100000

Power Supply

منبع تغذیه

100–240 V~, 50/60 Hz

Operating Conditions

شرایط بهره برداری

18~30°C, $\leq$ 80% Relative Humidity

75 kPa~106 kPa

Weight

وزن

30kg

سانا شفا بخش راسپینا

آدرس کارخانه: البرز- شهرک صنعتی بهارستان- فاز 3
ایمیل: info@ortanes.com
شماره تماس: 02633107 – 33108000

FSC CE NMPA IVD

